

# ARAHAN SWAB KENDIRI

## UNTUK KIT UJIAN PANTAS ANTIGEN BD VERITOR



**JANGAN TERUSKAN JIKA:**



Hidung berdarah dalam masa **24 jam** lepas



Pembedahan hidung dalam masa **4 minggu** lepas



Terdapat kecederaan di muka dalam masa **8 minggu** lepas

### PROSEDUR SWAB

- 1** Sila bersihkan tangan anda sebelum memulakan ujian.



- 2** Sebelum memulakan ujian, keluarkan satu lidi swab, satu tiub penimbang pengekstrakan dan satu kartrij ujian. Longgarkan penutup tiub penimbang pengekstrakan dan keluarkan kartrij ujian daripada bungkusannya.



- 3** Keluarkan lidi swab daripada bungkusannya.



- 4** Masukkan lidi swab ke dalam lubang hidung (~2.5cm). Putarkan lidi swab sebanyak 5 kali dan biarkannya berada di dalam lubang hidung selama 5 saat.




2.5cm

- 5** Ulangi untuk lubang hidung yang lain dengan lidi swab yang sama.




2.5cm

- 6** Masukkan lidi swab ke dalam tiub penimbang pengekstrakan untuk digaulkan. Benamkan dan gerakkan (naik turun) lidi swab selama 15 saat.

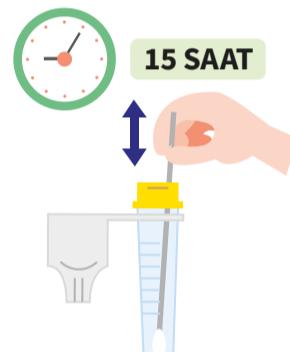

15 SAAT


- 7** Picit tiub penimbang pengekstrakan semasa menarik lidi swab keluar.

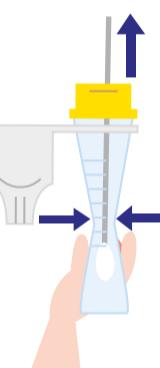

- 8** Tutup penutup tiub penimbang pengekstrakan dengan rapat. Anda seharusnya mendengar bunyi "klik".



- 10** Letakkan 3 titis larutan ke telaga sampel kartrij ujian.

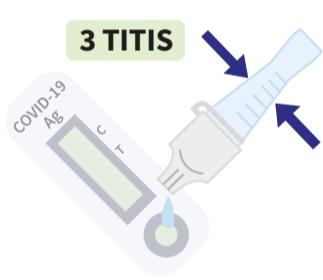

3 TITIS

- 11** Tunggu selama 15 minit sebelum memeriksa keputusan pada kartrij ujian. Sila letakkan kartrij pada permukaan yang rata sepanjang tempoh ini.



15 MINIT

- 12** Baca keputusan pada kartrij ujian. Jika anda melihat garisan muncul pada kedudukan "C" dan "T", ini menunjukkan ujian positif. Sila berjuma doktor anda.


Jika anda melihat garisan muncul hanya pada kedudukan "C", ini menunjukkan ujian negatif.

Jika anda melihat garisan muncul hanya pada kedudukan "T" atau tiada apa-apa garisan, ujian adalah tidak sah. Sila ulangi ujian pada kit ujian yang lain.

#### POSITIF

- "C" Garisan Kawalan - -  
"T" Garisan Ujian - -


#### COVID-19 Ag

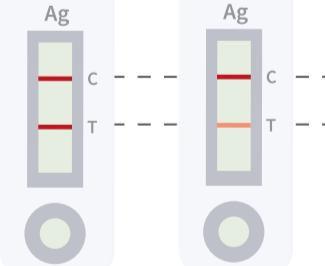

#### NEGATIF

- "C" Garisan Kawalan - - -  
"T" Garisan Ujian - - -

#### COVID-19 Ag

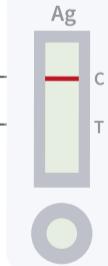

#### TIDAK SAH

- "C" Garisan Kawalan - -  
"T" Garisan Ujian - -

#### COVID-19 Ag



#### COVID-19 Ag




#### COVID-19 Ag



- 13** Buang semua alat yang telah dipakai dalam kit ujian ke dalam satu beg plastik dan ikat dengan gelang getah atau pengikat kabel. Letakkan beg yang sudah diikat ke dalam satu lagi beg plastik dan ikat beg plastik kedua ini dengan gelang getah atau pengikat kabel. Buang ke dalam corong sampah dengan segera.



- 14** Bersihkan tangan anda selepas ujian.

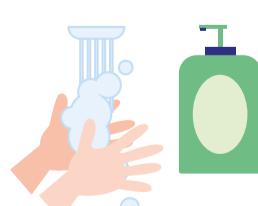

**Anda juga boleh merujuk kod QR ini untuk mendapatkan arahan video**

